

新薬品管理ソフト使用前の初期設定等

<管理ソフト更新後（2020/1/7以降）に実施してください。>

① モジュールをインストールする。

新薬品管理ソフトでは、従来のバーコードプリンター（PT-2430PC）で印刷するために、モジュール（プログラム）をPCにインストールする必要があります。モジュールがインストールされていない場合は以下のメッセージが表示されます。




<インストール方法>

1. 薬品管理ソフト ログイン画面の下部にある【P-Touch】をクリック。
2. 「PT-2430.zip」ファイルを「名前を付けて保存」し、適当な場所（デスクトップ等）に保存。
3. ダウンロードされた「PT-2430.zip」をダブルクリックして解凍。




4. 「P-Touch クライアントコンポーネント」フォルダー内の「**bsdkw31003jpn.exe**」をダブルクリックして実行。

5. インストールガイドに従って初期設定のまま(何も変更せず)「次へ」を押して設定を行う。

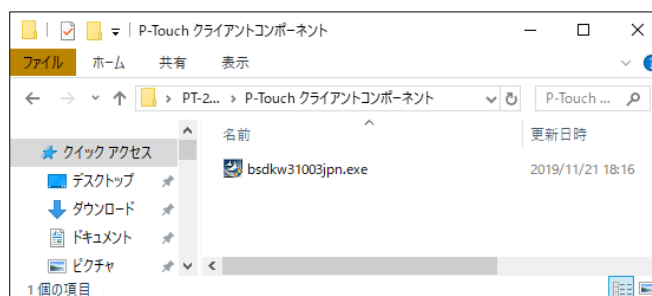

6. 次に、「インストールソフト」フォルダー内の「Setup.msi」をダブルクリックして実行。

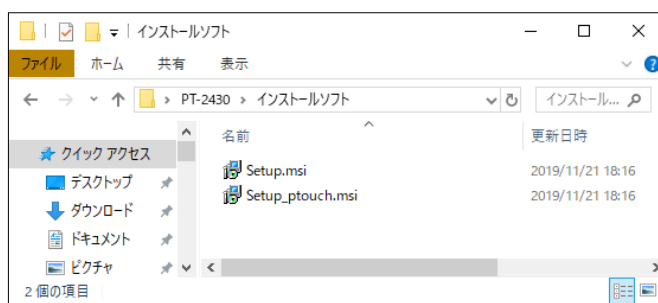

7. すべて初期設定のまま(何も変更せず)「次へ」を押して設定を行う。

注) 「InfogramListener の修復または削除」が表示された場合は、既にインストールされていますので、インストールせずに次の手順に進んでください。

注) 「Windows によって PC が保護されました」のメッセージが表示された場合は「詳細情報」をクリックすると「実行」ボタンが出ます。これをクリックし、設定を続けてください。

8. 最後に、「インストールソフト」フォルダー内の「Setup_ptouch.msi」をダブルクリックして実行。


9. すべて初期設定のまま(何も変更せず)「次へ」を押して設定を行う。インストール終了。

② デフォルトの設定を行う。

<この設定は利用者全員が各自設定する必要があります。>

「新薬品管理ソフト」に初めてログインしたら、画面上部にある【マスタメンテ】の【個人設定】をクリックし、薬品登録時等に選択する項目を、あらかじめ使用頻度の高い項目に設定してください。

1. 入手方法、入手先、内容量等：使用頻度の高い項目を選択する。
2. 保管場所：【選択】をクリック。【保管場所選択】の画面が出る。①【保管部屋一覧】のツリーをすべて展開し、保管部屋を選ぶと右側に②【保管場所一覧】が表示されるので、保管場所を選択し【OK】をクリック。

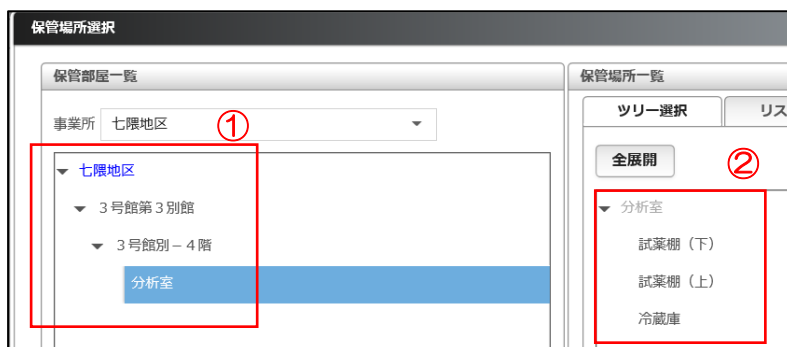

3. 使用部屋：【選択】をクリック。【保管部屋選択】画面が出るので、【全展開】をクリック。ツリーの中から【保管部屋】を選択し「OK」をクリック。

保管部屋選択

ツリー選択 リスト選択

事業所 七隈地区 **全展開**

▼ 七隈地区

▼ 3号館第3別館

▼ 3号館別-4階

分析室

4. 登録履歴検索対象：試薬登録時に、参照する登録履歴の範囲を決める。

- 自チームのみ ⇒ 自分の研究室で過去に登録した薬品のみ対象
- 全チーム ⇒ 学内で過去に登録した全ての薬品が対象

登録履歴検索対象 自チームのみ

プリンタ 全チーム

自チームのみ

5. プリンタ：【バーコード専用】及び【Brother PT-2430】を選択。汎用プリンタを選択する場合、別途設定が必要（センターまでご連絡ください）。

6. 「使用時入力時、前回残量をデフォルト表示」：「する」を選択すると、使用量入力時に【残量コピー】を押さなくても前回の薬品残量が自動的に入力される。

CHEMICAL DESIGN

検索 在庫登録 容器処理 管理表 棚卸 マスタメンテ ヘルプ リンク

チーム：専門員室 所属長名：平田 修 ログインユーザ：平田 修 権限名：-

測定種別 内容量 容器込重量

使用前残量* 390 ml

使用後残量* ml

使用量* ml

残量コピー 電子天秤 電子天秤 電子天秤

全ての入力、確認が終了したら右下の【更新】ボタンを押して設定完了。

以上